

Warnhinweise

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Das TQ Solo emittiert Licht mit hoher Intensität und längere (mehr als 30 Sekunden) Exposition des Lichts direkt auf die Augen kann Schäden verursachen. Direkte oder reflektierte Strahlung in die Augen sollte verhindert werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Schutzbrille.
- Das TQ Solo kann zu Fehlfunktionen führen, wenn es in der Nähe eines Schrittmachers verwendet wird.
- Vermeiden Sie direkte Aussetzung der behandelten Fläche mit anderem intensivem Lichtquellen wie UV-Lampen während der Behandlung. Die Exposition gegenüber anderen Lichtquellen hoher Intensität kann zu übermäßiger Erwärmung führen.
- Die in der Bedienungsanleitung empfohlene Behandlungsdauer und Häufigkeit sollte nicht überschritten werden
- Verwenden Sie das Gerät nicht direkt auf verletzter Haut. Das Gerät ist nicht steril und kann eine Infektion verursachen.
- Das TQ Solo ist programmiert, um eine begrenzte Menge an Energie, in die Haut zu liefern, um vor Überhitzung, die Beschwerden verursachen kann, zu schützen. Wenn das Gerät, wie angegeben, verwendet wird, wird die Haut nur auf Temperaturen von 104-113 ° F (40-45 ° C) erhitzt. Wiederholte Behandlungen eines einzelnen Teils des Körpers oder kontinuierliche Behandlung wird nicht dazu führen, dass die Haut überhitzt. Allerdings, um Beschwerden zu verhindern, sollte das TQ Solo nicht auf einen beliebigen Bereich des Körpers, welche überempfindlich auf Wärme sein können (dh auf einem sonnenverbrannten Bereich) angewendet werden.
- Halten Sie das TQ Solo Gerät von Kindern fern.
- Sicherheit der Verwendung von TQ Solo während der Schwangerschaft ist nicht erwiesen.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Über empfindliche Hautflächen oder in Gegenwart von schlechter Durchblutung verwenden nicht die TQ Solo.
- Verwenden Sie nur den mit Ihrem TQ Solo mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie kein anderes Netzteil, es kann einen elektrischen Schlag verursachen.

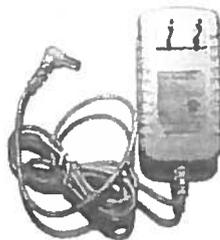


Figure 3: Main Power Adaptor

- Nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Kontakt mit Wasser könnte einen elektrischen Schlag verursachen.

Kontraindikationen

Behandeln sie nicht:

- Direkt in die Augen
- Schwangere oder stillende Frauen
- Über verdächtigen Läsionen oder Krebs
- Über den Hals (Schilddrüsenregion) oder Brust (Nervus vagus oder Herzgegend des Thorax)
- Über Bereichen mit aktiven Blutungen